


## Dräger DrugCheck® 3000 Uređaj za indicaciju droga

Dräger DrugCheck® 3000 upotrijebite kako biste u roku od nekoliko minuta saznali je li osoba nedavno koristila određene droge. Kompaktan i brz test na droge koji upotrebljava slinu, jednostavno i jeftino daje pouzdane rezultate. Uređaju nije potrebna električna energija i može se koristiti bilo gdje.

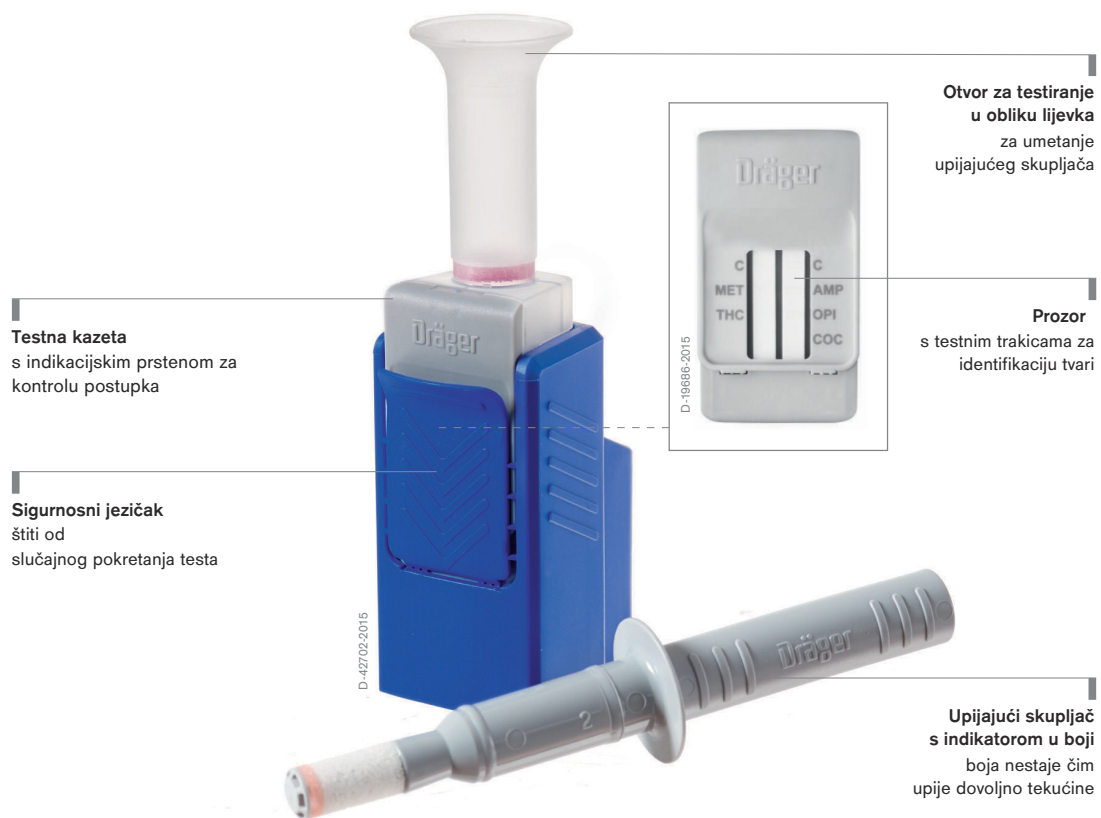

## Prednosti

---

### Jednostavno i sigurno uzimanje uzoraka

Dräger DrugCheck 3000 sastoji se od dva dijela: upijajućeg skupljača za uzimanje uzorka sline i testne kazete za analizu. Testna kazeta sadrži pufersku tekućinu i prozor s dvije testne trakice – kontrolnu i testnu liniju. Test se provodi u tri laka koraka: uzmite uzorak sline, protresite testni komplet, pričekajte kratko razdoblje inkubacije, a zatim započnite test. Indikator u boji nestaje čim štapić upije dovoljno sline. Kada se u prozoru pojave kontrolne linije, možete očitati rezultate. Ako je rezultat testa negativan, uz razred pripadajuće tvari pojavit će se linija (droga). To znači da nijedna od ciljnih tvari nije otkrivena u uzorku. Ako se linija ne pojavi uz neki od razreda tvari, rezultat je pozitivan za pripadajuću tvar.

---

### Brza i osjetljiva analiza

Testirajte istovremeno na pet skupina tvari s uređajem Dräger DrugCheck 3000: kokain, opijati, amfetamini, metamfetamini/sintetičke droge (npr. ecstasy) i kanabis (THC). Od svih navedenih skupina tvari najčešće se konzumira kanabis, a njega je i najteže otkriti (THC). Zbog toga je Dräger DrugCheck 3000 optimiziran da otkrije THC, te sada ima dvije opcije mjerenja: ovisno o odabranom vremenu čekanja (predinkubacija), postoji brza opcija s visokom ili osjetljiva opcija niskom eliminacijom THC-a. Čitavo testiranje traje samo 3-5 minuta.

---

### Nedvosmisleno otkrivanje droga na licu mjesta

Zbog svojeg kompaktnog dizajna koji stane u džep DrugCheck 3000 se lako prenosi. Brzo i jednostavno se priprema za uporabu, primjeren je za fleksibilne uporabe kao što su prometne provjere i testiranje na radnom mjestu gdje je važna sigurnost\*. Testni komplet nema električnih dijelova, što uporabu čini sigurnom na opasnim mjestima.

---

### Dodatne prednosti

Dräger ima desetljeća iskustva u opremi za mjerenje alkohola i metodama za otkrivanje droga. Za uređaj DrugCheck 3000 Dräger upotrebljava testne metode dokazanog sustava Dräger DrugTest® 5000, koji pouzdano otkriva čak i najmanje tragove THC-a. S jednokratnim testnim kompletom DrugCheck 3000 nije moguće manipuliranje, a uporaba je higijenska.

## Povezani proizvodi

D-54720-2012



### Dräger DrugTest® 5000

Bez pipetiranja, bez kapanja, bez mjerenja vremena: Prikupljanje uzorka sline brzo je i jednostavno s uređajem Dräger DrugTest® 5000. Prikupljeni uzorak može se zatim odmah analizirati za točne rezultate na licu mjesta.

D-6296-2009



### Dräger SSK 5000

Sustav za uzimanje uzoraka Dräger SSK 5000 brzo se i jednostavno koristi i savršen je za testiranje površina na droge. Kada se upotrebljava s Dräger DrugTest® 5000, uzorak se može prenijeti u testnu kazetu i testirati na kontaminaciju drogom. Uzorak se također može pohraniti za daljnja testiranja.

ST-13226-2007



### Dräger DCD 5000

Jednostavno, brzo i sigurno otkrivanje intoksikanata i droga: Dräger DCD 5000 omogućuje jednostavno prikupljanje sline te pruža mogućnost pohranjivanja uzoraka i njihovo slanje u laboratorij radi analize – bez mogućnosti krivotvorenja uzorka u međuvremenu.

## Tehnički podaci

### Test za otkrivanje droge u tekućini iz usta

Dimenzije (D x V x Š)	32 x 111 x 57 mm 1,26 x 4,37 x 2,24 inča
Težina	< 30 g (0,07 lb)
Radni raspon	Rad: 5 °C do 40 °C (41 °F do 104 °F) pri 5 % do 95 % relativne vlažnosti
Pohrana / prijevoz	4 °C do 25 °C (39 °F do 77 °F)
Vrijeme mjerenja	Brzo mjerenje: analiza < 3 minute Osjetljivo mjerenje: analiza < 5 minuta
Odabir načina mjerenja	Ovisno o odabranom vremenu predinkubacije i željenoj razini eliminacije THC-a – brzo ili osjetljivo čitanje.
Licence / standardi	Licenciran kao medicinski proizvod u okviru EU-a u skladu s Direktivom 98/79/EZ o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (IVD). Izvan Europske unije za nemedicinsku uporabu (Non-IVD) ili forenzičku uporabu (samo SAD).

## Informacije za naručivanje

Dräger DrugCheck® 3000	Opis	Br. za naručivanje
<b>Test za otkrivanje droge u tekućini iz usta</b>		
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 IVD	Pakiranje 20 kompleta	83 25 500
Dräger DrugCheck® 3000 STK 5 Non-IVD	Pakiranje 20 kompleta	83 25 580

The Dräger DrugCheck® 3000 otkriva sljedeće tvari:

- Kokain (COC)
- Opijate (OPI)
- Kanabis (THC)
- Amfetamine (AMP)
- Metamfetamine (MET)

## Napomene

## Napomene

**GLAVNO SJEDIŠTE UPRAVE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lübeck, Njemačka  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**ZA HRVATSKU**  
Dräger Medical Croatia d.o.o.  
Avenija Većeslava Holjevca 40  
100 10 Zagreb  
Tel +385 1 65 99 444  
Fax +385 1 65 99 403  
[prodaja.mt@draeger.com](mailto:prodaja.mt@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Beč, Austrija  
Tel +43 1 60 90 4809  
Fax +43 1 69 95 497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

